

Lemi[®]
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT



AESTHETIC SURGERY
DERMATOLOGY
CHIRURGIA ESTETICA
DERMATOLOGIA



* M: Nefos 6986

Version with anatomic mattress and flat armrests / Versione con materasso anatomico e braccioli automatici

**COD. 946**

Lemi 2 is equipped with a hydraulic lift for height adjustment, while the legs, head and back are manually adjustable. 360° chair rotation. Wide mattress customization. Ideal for diagnostics, check-up, dermatology and aesthetic surgery



Lemi 2 è dotata di pompa idraulica per la regolazione dell'altezza, mentre gambe, testa e schiena sono regolabili manualmente. Rotazione poltrona 360°. Ampia personalizzazione del materasso. Ideale per diagnostica, check-up, dermatologia e chirurgia estetica.

** The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.*

** Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale della finitura.*

Focus on

- Hydraulic lift adjustment
- Manual legrest, backrest and trendelenburg adjustment
- Standard flat mattress
- Fire retardant class 1IM, "Azo" free, antibacterial, antifungal covering
- Entirely closed ABS casing
- 360° chair rotation
- Regolazione altezza con pompa idraulica
- Regolazione manuale di trendelenburg, schiena, gambe e testa
- Materasso piatto di serie
- Rivestimento ignifugo classe 1IM, "Azo" free, antibatterico, antimicotico
- Carter in ABS completamente chiuso
- Rotazione poltrona 360°

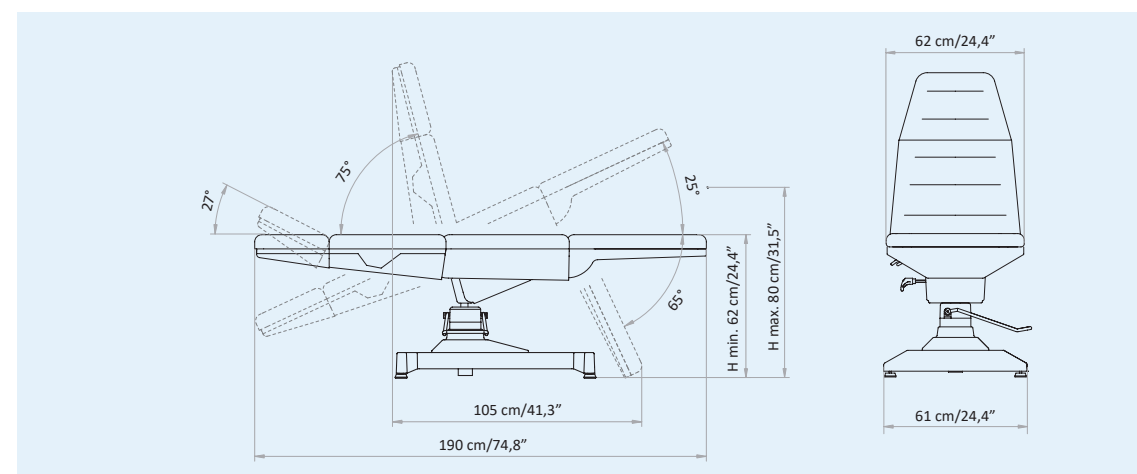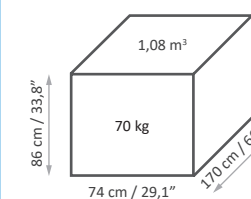**Packaging details**

MAXIMUM CAPACITY
PORTATA MASSIMA

150 kg

MOVEMENTS

- 1 movement by hydraulic lift: height
- 4 manual movements: backrest, legrest, trendelenburg, headrest adjustment
- 360° chair rotation

MOVIMENTI

- 1 movimento con pompa idraulica: altezza
- 4 movimenti manuali: schiena, gambe, trendelenburg, inclinazione testa
- Rotazione poltrona 360°



Hydraulic lift
Pompa idraulica

62-80 cm
(24,4" - 31,5")

Height adjustment by hydraulic lift
Regolazione altezza con pompa idraulica



Manual Trendelenburg
Trendelenburg manuale



180° rotation on both sides
Rotazione 180° da entrambi i lati



Manual backrest
Schiena manuale



Adjustable headrest
Testa regolabile



Manual legrest
Gambe manuali

Version with anatomic mattress and flat armrests
Versione con materasso anatomico e braccioli automatici

LEMI 2 BI-ZAK

LEMI 2 BI-ZAK

UPGRADE

COD. 955

Featuring a reliable hydraulic lift and manually adjustable, with 360° rotation. Standard Bi-Zak mattress (adjustable headrest and footrest) fully customizable. Ideal for diagnostics, check-up, dermatology and aesthetic surgery.

Dotato di pompa idraulica e regolabile manualmente, con rotazione a 360°. Materasso standard Bi-Zak (testa e piedi regolabili) totalmente personalizzabile. Ideale per diagnostica, check-up, dermatologia e chirurgia estetica.

Adjustable footrest / Piede regolabile

Adjustable headrest / Testa regolabile

** The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.*


** Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale della finitura.*

* M: Nefos 6


Version with Bi-Zak anatomic mattress / Versione con materasso anatomico Bi-Zak

Focus on

- Hydraulic lift adjustment
- Manual legrest, backrest and trendelenburg adjustment
- Standard Bi-Zak flat mattress (adjustable headrest and footrest)
- Fire retardant class 1IM, "Azo" free, antibacterial, antifungal covering
- Entirely closed ABS casing
- 360° rotation
- Regolazione altezza con pompa idraulica
- Regolazione manuale di trendelenburg, schiena, gambe e testa
- Materasso standard Bi-Zak piatto (testa e piedi regolabili)
- Rivestimento ignifugo classe 1IM, "Azo" free, antibatterico, antimicotico
- Carter in ABS completamente chiuso
- Rotazione 360°

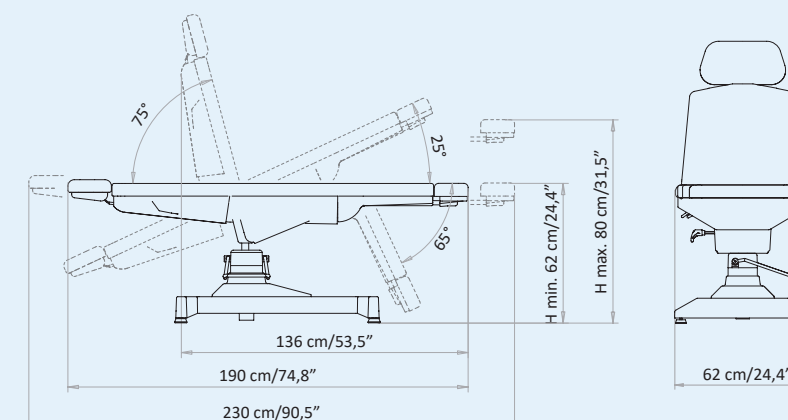

Packaging details

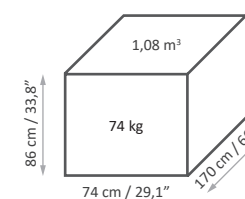

MAXIMUM CAPACITY
PORTATA MASSIMA

150 kg

HEMODIALYSIS BLOOD SAMPLING EMODIALISI PRELIEVI LEMI 2 BI-ZAK

GYNAECOLOGY GINECOLOGIA LEMI 2 BI-ZAK



MOVEMENTS

- 1 movement by hydraulic lift: height
- 5 manual movements: backrest, legrest, trendelenburg, adjustable/removable headrest and footrest
- 360° chair rotation

MOVIMENTI

- 1 movimento con pompa idraulica: altezza
- 5 movimenti manuali: schiena, gambe, trendelenburg, testa e piede regolabili / estraibili
- Rotazione poltrona 360°



Manually adjustable and removable Zak headrest
Testa Zak regolabile ed estraibile manualmente



62-80 cm
(24,4" - 31,5")

Height by hydraulic lift
Altezza con pompa idraulica



Manual Trendelenburg movement
Movimentazione Trendelenburg manuale

25°

Version with anatomic mattress and flat armrests
Versione con materasso anatomico e braccioli automatici



75°

Manual backrest
Schiena manuale



Manually adjustable and removable footrest
Piede regolabile ed estraibile manualmente



Manual legrest
Gambe manuali

65°

MATTRESS CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE MATERASSO



The innovative Nefos materials - which are exclusive for LEMI products - and their special finishing touch guarantee easy-cleaning and hygiene. Their extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best.

Gli innovativi materiali Nefos - che sono un'esclusiva dei prodotti LEMI - ed il loro speciale tocco di finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le loro straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni. Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam.

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly when viewed through a screen. Therefore, the **SELECTION OF MATTRESS FABRICS** must take place **AFTER CONSULTING** the **PHYSICAL SAMPLES** of the **COLOR CHARTS**.

ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY

TECNOLOGIA ANTIMICROBICA



WHAT DOES IT MEAN?

The Nefos vinyl leather fabric is made through production processes involving an antimicrobial additive technology. Studies show that fabrics treated with this technology are up to 99.9% resistant to harmful bacteria.

The exceptional result that derives from it is a sanitized fabric with a permanent effect, whose matrix guarantees safety from any contamination thanks to the antibacterial, antifungal and anti-mold effect, which protects the coating from fungal attacks that can cause damage or bad smells, for the entire product's life cycle. The antimicrobial additive technology protects the fibers without changing their characteristics, thus preserving their freshness over time.

A high level of hygiene is essential, that's why this kind of technology was chosen by LEMI for all its bed and chair lines. The peculiarity of these coatings has allowed LEMI to give further value to its products, since thanks to this technology, the cleaning phase of Nefos vinyl leather fabric does not require the use of sanitizing products but requires the use of a soft cloth moistened and soapy, to be rinsed simply with clean water.

CHE COSA SIGNIFICA?

La linea di rivestimenti in vinilpelle Nefos è realizzata attraverso processi produttivi che coinvolgono una tecnologia additivante antimicrobica. Studi dimostrano che i tessuti trattati con questa tecnologia sono resistenti fino al 99,9% ai batteri nocivi.

Il risultato eccezionale che ne deriva è un tessuto igienizzato ad effetto permanente, la cui matrice garantisce sicurezza da eventuali contaminazioni grazie all'effetto antibatterico, antifungino e antimuffa, il quale protegge il rivestimento da attacchi micotici che possono essere causa di danni o di cattivi odori, per l'intera durata del ciclo di vita del prodotto. La tecnologia additivante antimicrobica protegge le fibre senza modificarne le caratteristiche, conservandone così la freschezza nel tempo.

Un alto livello di igiene è fondamentale, ecco perché questo tipo di tecnologia è stata scelta da LEMI per tutte le sue linee di poltrone e lettini. La peculiarità di questi rivestimenti ha permesso a LEMI di dare un ulteriore pregio ai propri prodotti, poiché proprio grazie a questa tecnologia, la fase di pulizia dei tessuti vinilpelle Nefos non necessita dell'utilizzo di prodotti igienizzanti ma prevede l'uso di un panno morbido inumidito e insaponato, da sciacquare semplicemente con acqua pulita.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la **SELEZIONE** dei **RIVESTIMENTI** dei **MATERASSI** deve avvenire **PREVIA CONSULTAZIONE** della **CAMPIONATURA FISICA** delle **CARTELLE COLORI**.

BASE CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE BASE



We provide a thermoformed ABS base, completely closed to prevent any infiltration of powders or liquids. The result is a very strong material that is scratch resistant and easy to clean.

Forniamo una base in ABS termoformato, completamente chiuso per evitare qualsiasi infiltrazione di polveri o liquidi. Il risultato è un materiale molto robusto, resistente ai graffi e facile da pulire.

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly when viewed through a screen. Therefore, the **SELECTION OF THE FINISHES** of the **BASES** and **MATTRESS FABRICS** must take place **AFTER CONSULTING** the **LUXURY BOX PHYSICAL SAMPLES** and the **COLOR CHARTS**.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la **SELEZIONE DELLE FINITURE** delle **BASI** e dei **RIVESTIMENTI** dei **MATERASSI** deve avvenire **PREVIA CONSULTAZIONE** della **CAMPIONATURA FISICA** della **LUXURY BOX** e delle **CARTELLE COLORI**.

ACCESSORIES UPON REQUEST


ACCESSORI SU RICHIESTA

All chairs have a standard setting customizable upon request.
Tutte le poltrone hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.

	Flat armrest couple Coppia braccioli automatici		Roll Holder (66 cm) Roll Holder (75 cm) for XL mattress Portarotolo (66 cm) Portarotolo (75 cm) per materassi XL		Heel support couple (fixed with fix clamp and guides on the seat) Coppia reggitallone (da fissare con morsetti fissi e guide sulla seduta)
	ONLY FOR / SOLO PER LEMI 2 BI-ZAK Small Zak headrest Testa Zak piccola		Wheels with brake Ruote con freno		Thigh supports couple (fixed with fix clamp and guides on the seat) Coppia reggicosce con snodo (da fissare con morsetti fissi e guide seduta)
	ONLY FOR / SOLO PER LEMI 2 BI-ZAK Strip headrest Testa strip		Curtain holder (fixed with rotating clamp and guides on the seat) Reggitelo (da fissare con morsetto girevole e guide schiena)		Inox tray with support (fixed with fix clamp and guides on the seat) Vassoio inox completo di telaio (da fissare con morsetto fisso e guide seduta)
	ONLY FOR / SOLO PER LEMI 2 BI-ZAK Anto headrest for hair transplant Testa Anto per trapianto capelli		I.V. Rod (fixed with rotating clamp and guides on the back) Asta portaflebo (da fissare con morsetto girevole e guide schiena)		Hemo foot headrest Supporto piede Hemo
	ONLY FOR / SOLO PER LEMI 2 Anatomic mattress Materasso anatomico		Seat guide couple Coppia guide seduta		Customization with logo Personalizzazione con logo
	ONLY FOR / SOLO PER LEMI 2 BI-ZAK Anatomic Bi-Zak mattress Materasso Bi-Zak anatomico		Back guide couple Coppia guide schiena		
	Mattress XL Materasso XL		Fixed clamp Morsetto fisso		
	Extra comfort mattress with Memory Foam Materasso extra comfort con Memory Foam		Rotating clamp Morsetto girevole		
	Mattress without stitches Materasso senza cuciture		Blood sample taking armrest couple (fixed with fix clamp and guides on the seat) Coppia braccioli da prelievo con snodo (da fissare con morsetto fisso e guide seduta)		
	Option 180° rotation Opzione rotazione 180°		Medical armrest couple (to be fixed with rotating clamp and guides on the back) Coppia braccioli medicali (da fissare con morsetti girevoli e guide schiena)		
	Plastic leg protection Proteggi gambe in plastica				






LEMI MATTRESSES STANDARD

Each mattress is HANDCRAFTED, therefore the ACTUAL MEASUREMENTS MAY VARY from those indicated in the catalogue by approximately ± 1 cm (also based on the selected configuration).

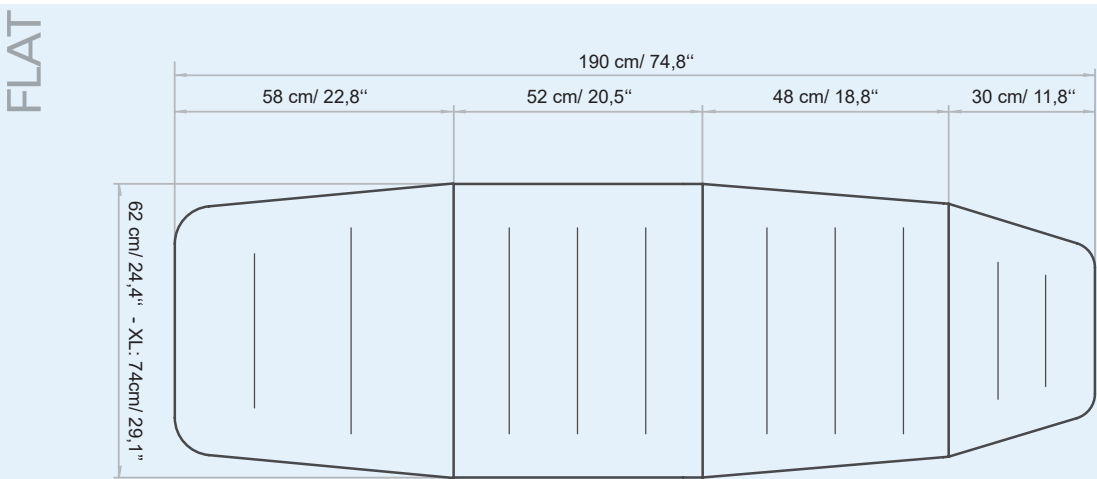

MATERASSI LEMI BI-ZAK

Ogni materasso è realizzato A MANO, pertanto le MISURE REALI POTREBBERO VARIARE rispetto a quelle indicate nel catalogo di circa ± 1 cm (anche in base alla configurazione selezionata).

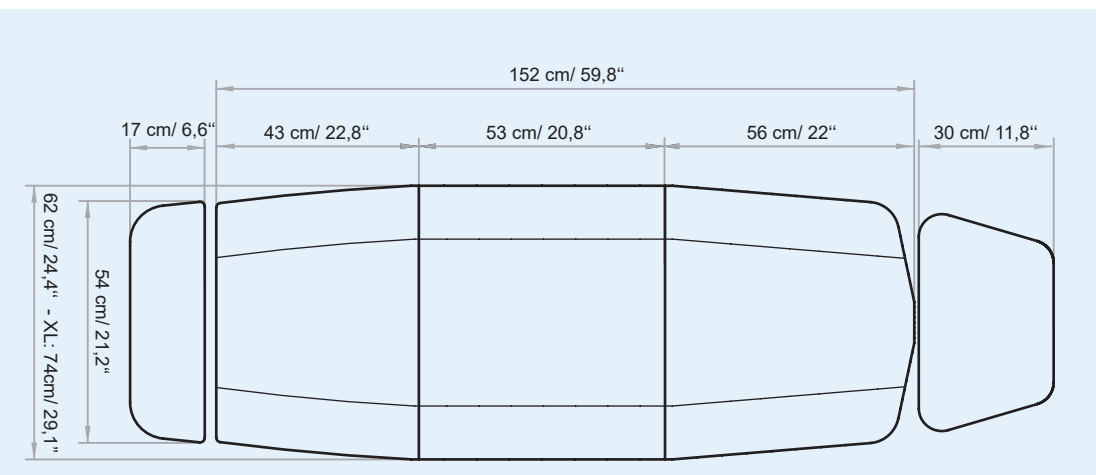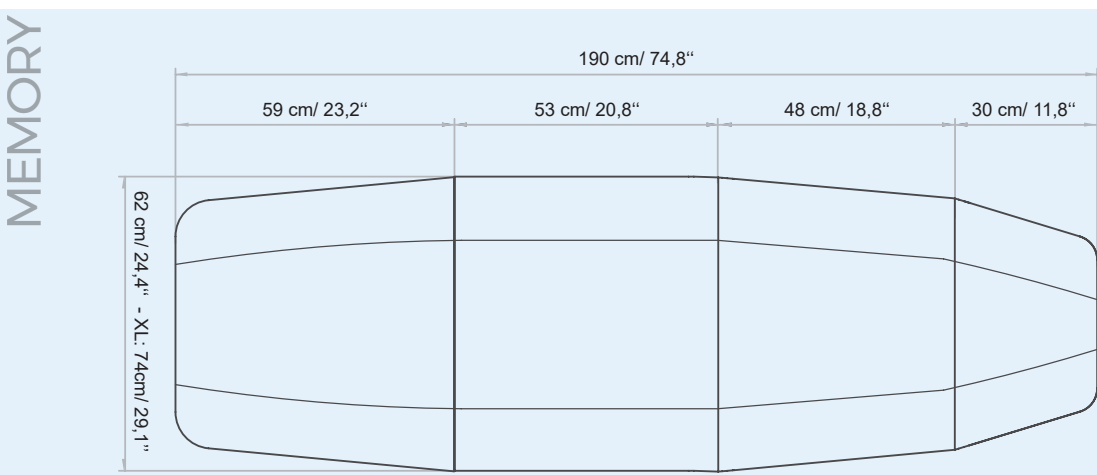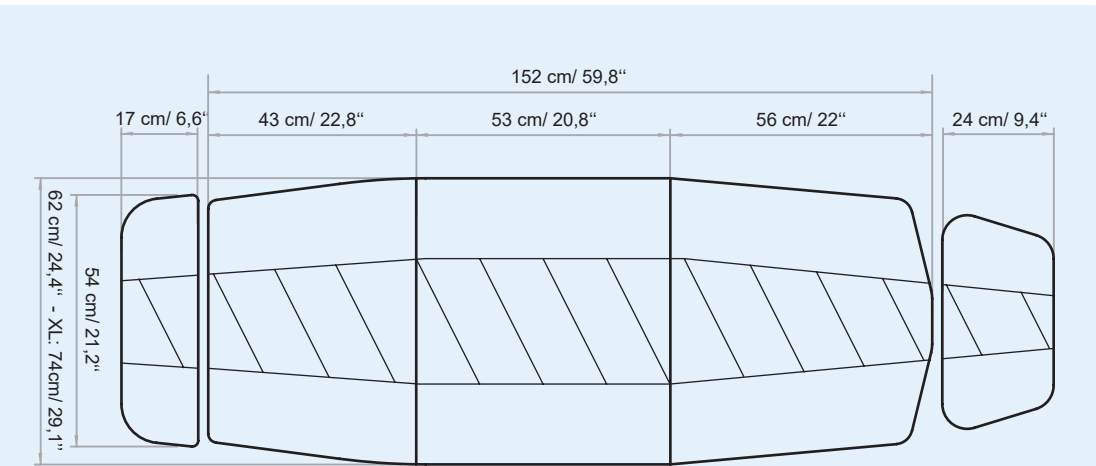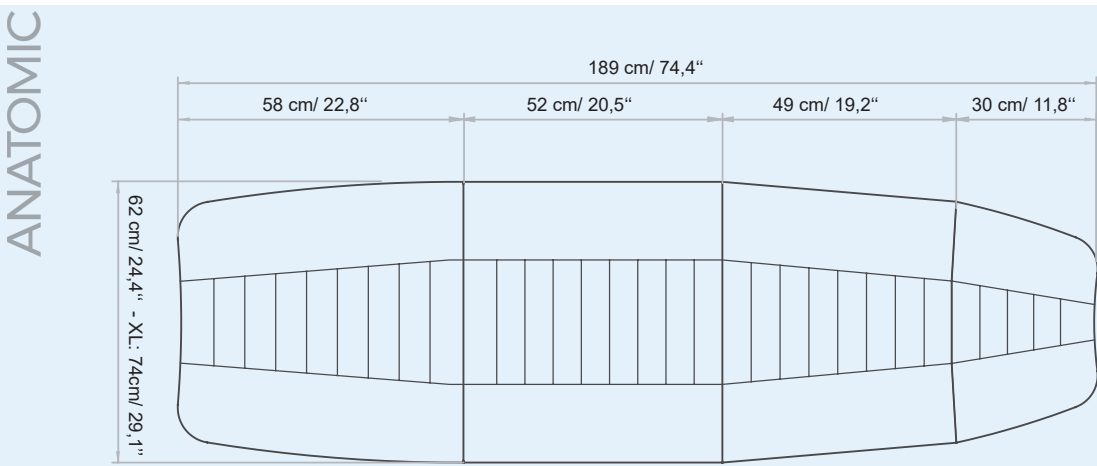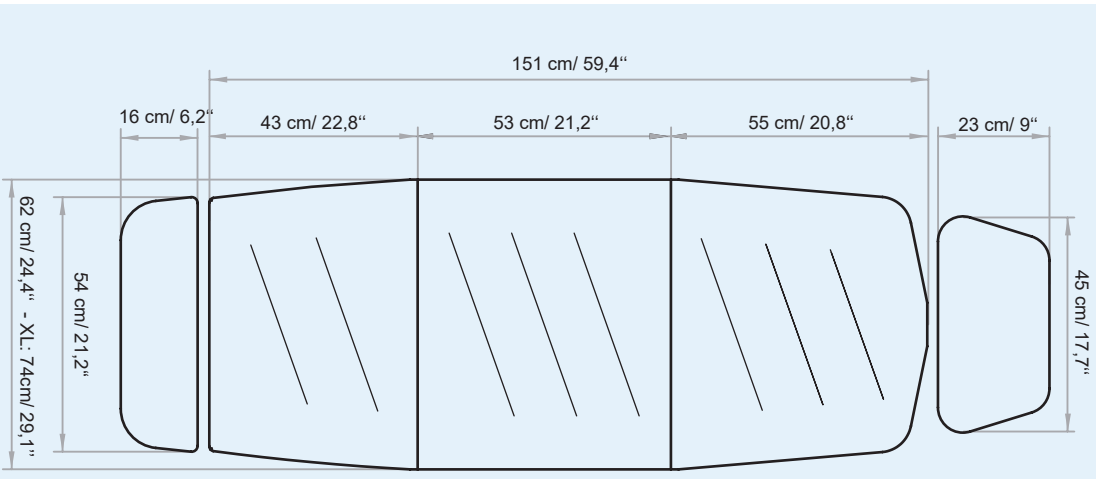

TECHNICAL REQUIREMENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION / SPECIFICHE TECNICHE

MINIMUM HEIGHT: 62 CM / 24,4"

MAXIMUM HEIGHT : 80 CM / 31,5"

ANGLE OF INCLINATION TRENDELENBURG: 25°

ANGLE OF INCLINATION BACK REST: 75°

ANGLE OF INCLINATION LEG REST: 65°

ANGLE OF INCLINATION HEAD REST: 27°

MATTRESS LENGTH: 190 CM / 74,8"

MATTRESS WIDTH: 61 CM / 24,4"

LATEX-FREE, NON-TOXIC AND NON-CARCINOGENIC MATERIALS

FIRE-RESISTANT UPHOLSTERY : UNI 9175 CLASS I M

ALTEZZA MINIMA: 62 CM

ALTEZZA MASSIMA: 80 CM

ANGOLO INCLINAZIONE TRENDELENBURG: 25°

ANGOLO INCLINAZIONE SCHIENA: 75°

ANGOLO INCLINAZIONE GAMBE: 65°

ANGOLO INCLINAZIONE TESTA: 27°

LUNGHEZZA MATERASSO: 190 CM

LARGHEZZA MATERASSO: 61 CM

MATERIALI PRIVI DI LATTICE, ATOSSICI E NON CANCEROGENI

RIVESTIMENTO IGNIFUGO: UNI 9175 CLASS I M

WARRANTY / GARANZIA

STRUCTURE: 10 YEARS

UNDEFORMABLE FOAM: 5 YEARS

STRUTTURA: 10 ANNI

GOMMA INDEFORMABILE: 5 ANNI

REGULATIONS

All Equipment is  marked

Electrical equipment and beds

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations.
Directive 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.
MDR Regulation 745/2017 (EU). Class I Medical Device.

Hydraulic equipment and beds

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations.
MDR Regulation 745/2017 (EU). Class I Medical Device.

Images

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.

NORME

Tutte le attrezzature sono a marchio 

Attrezzature e lettini elettrici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione.
Direttiva 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazione.
Regolamento MDR 745/2017 (UE). Dispositivo Medico di Classe I.

Attrezzature e lettini idraulici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione.
Regolamento MDR 745/2017 (UE). Dispositivo Medico di Classe I.

Immagini

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.

Lemi[®]
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT

Brusaferri & C srl

Via Mara Maretti Soldi, 13
26011 Casalbuttano (CREMONA) ITALY
Phone +39-0374-363069 Fax +39-0374-363071
info@lemigroup.it service@lemigroup.it

www.lemimd.com