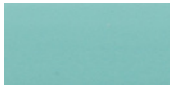
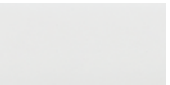
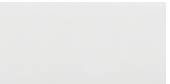


OPZIONI COLORE

Options de couleur / Colour choices


Coperchio Couvercle Cover	 Verde / Vert / Green	 Blu / Bleu / Blue	 Bianco / Blanc / White	 Grigio / Gris / Grey
Frontalino per cassettino recupero polveri Façade pour petit tiroir de récupération des poussières Front drawer for small drawer dust raising	 Verde / Vert / Green	 Blu / Bleu / Blue	 Bianco / Blanc / White	 Grigio / Gris / Grey
Vassoio Plateau Tray	 Verde / Vert / Green	 Blu / Bleu / Blue	 Bianco / Blanc / White	 Grigio / Gris / Grey
Rivestimento pedana Revêtement pour le socle Covering for platform		 Blu / Bleu / Blue		 Grigio / Gris / Grey

Caratteristiche tecniche

Caractéristiques techniques/ Technical features

Dimensioni: Dimensions / Size	L. 500 x P. 480 x H. 1120 mm		
Dimensioni imballo: Dimensions de l'emballage / Packing Size	L. 1200 x P. 600 x H. 650 mm		
Peso: Poids / Weight	kg. 50	kg. 60	
Dotazioni: Equipements / Standard Equipements	- Pulitrice monoalbero a 1400 giri/minute - Aspirazione silenziosa - Lampada ad alta resa cromatica - Interruttore generale e Interruttori per l'accensione delle singole funzioni - Protezione in policarbonato - Base auto - frenante - Alloggiamento per qualsiasi marca di reostato e micromotore - Sacchetto filtro in fibre sintetiche - Polisseuse mono-arbre à 1400 tours/minute - Système d'aspiration silencieux - Lampe à haut rendement chromatique - Interrupteur général et interrupteurs pour allumer chaque appareil - Protection en polycarbonate - Base autofreinante pour l'appuis des pieds - Logement pour une marque quelconque de rhéostat et micromoteur - Filtre à sac en fibres synthétiques - 1400 rpm single-shaft polisher - Noiseless suction unit - Lamp with high cromatic yield - Master switch and switches for singles appliances - Polycarbonate protection - Self-braking base to lay feet on - Housing for any make of rheostat and micromotor - Filter bag made from synthetic fibres		
Potenza totale: Puissance totale / Total Power Supply	1470 W	Tensione : Tension / Voltage	230V/50Hz

Technical drawing of the floor buffer machine showing dimensions: width 50, height 112, and base width 48. A side view shows a height of 86 from the base to the top of the machine housing.

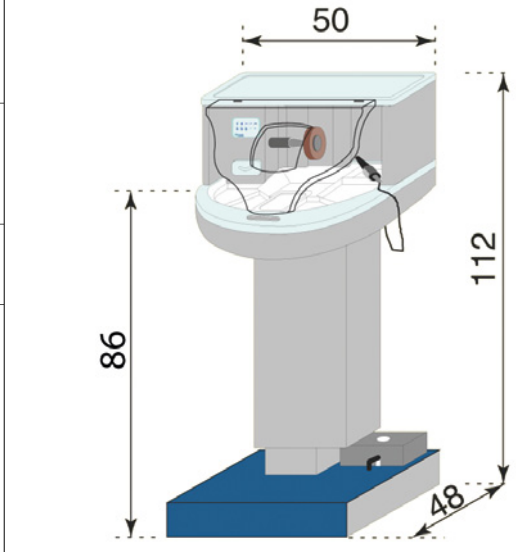

AMICO BOX



MACCHINA PER LA FINITURA DI
STRUTTURE PROTESICHE

APPAREIL POUR LES RETOUCHES DE
PROTHESES AU CABINET DENTAIRE


PROSTHESIS FINISHING UNIT



Zilfor di Zilli Tiziano - Via Fossa 4 - 31051 - Follina (TV) - www.zilfor.com

L'unità di lavoro Amico Box è il mini-laboratorio portatile dalla linea armoniosa ed ergonomica, dal design ricercato e funzionale. Ideale postazione di lavoro su base auto frenante, garantisce ottime condizioni di illuminazione e di pulizia e si sposta facilmente da un'unità operativa all'altra per consentire i ritocchi direttamente alla poltrona.

Amico Box è corredato di pulitrice monoalbero, impianto silenzioso di aspirazione ad alta efficienza, lampada ad alta resa cromatica, interruttore generale e interruttori di accensione dei singoli apparecchi, protezione in polycarbonato con finestra centrale in plexiglas a protezione contro schizzi e schegge, sacchetto filtro in fibre sintetiche per il recupero delle polveri di lavoro e di un alloggiamento per qualsiasi marca di reostato e micromotore.

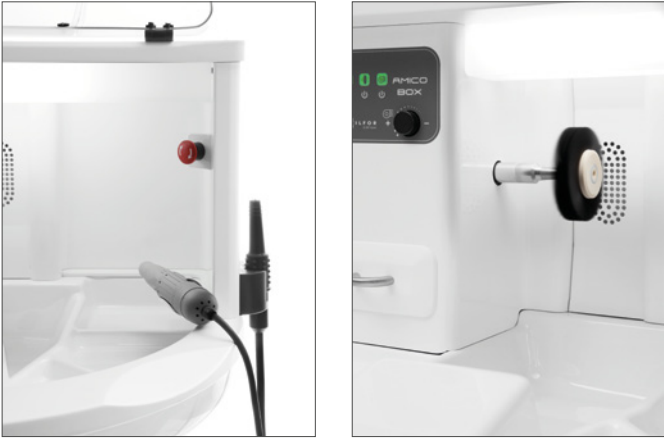

L'Amico Box est un mini-laboratoire mobile qui se caractérise par un design agréable et une conception ergonomique et par une grande souplesse d'emploi. C'est une station de travail idéale qui garantit d'excellentes conditions d'éclairage et des retouches dans une propreté absolue; il se déplace aisément d'un cabinet à l'autre pour être utilisé près du fauteuil.

L'Amico Box est équipé en série d'une polisseuse mono-arbre, d'une aspiration puissante et silencieuse, d'une lampe à haut rendement chromatique, d'un interrupteur général, d'un interrupteur pour l'allumage indépendant de chaque appareil. Pourvu d'un capot de protection en polycarbonate avec une fenêtre centrale en plexiglas, pour une protection anti projection. Un filtre de récupération des poussières, en fibres synthétiques est positionné à l'arrière. Le socle repose pied est auto freinant. Le positionnement du moteur et du rhéostat de toute marques est très facile grâce à une prise électrique prévue pour le branchement.

Amico Box is a portable mini-lab characterized by an harmonious and ergonomic design and it's the ideal workstation for its flexible employment that guarantees excellent lighting and cleaning conditions and it's easy to move from one room to another for retouches directly at the chair.

Amico Box is equipped with a single shaft brush with high functionality, an high polisher performance, a silent suction system with high functionality, a lamp with high colour rendering, a master switch and also switches for all devices, a polycarbonate protection with a central plexiglas plate to protect the working area, synthetic fibres filter bags for raising dust and the lodging for any brand of rheostat and micromotor.

* Micromotore e siringa d'aria non compresi
Micromoteur et soufflette pas compris
Micromotor and air-nozzle not included




ON-OFF
Illuminazione ad alta resa cromatica
Illumination à haut rendement chromatique
High chromatic stability lighting

ON-OFF
Pulitrice monoalbero
Polisseuse mono-arbre
Single shaft polishing unit

ON-OFF
Comando aspirazione silenziosa
Système d'aspiration silencieux
Quiet suction unit

+ / -
Regolazione intensità aspirazione
Régulation puissance de l'aspiration
Suction speed control

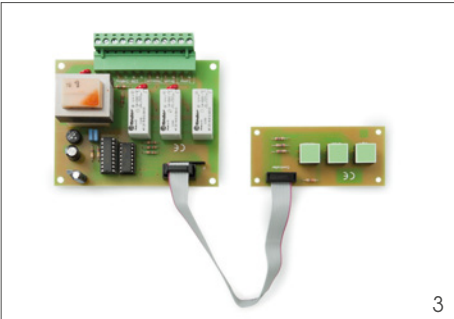

1. Filtro protezione motore
Filtre de protection du moteur
Motor protection filter
2. Sacchetto filtro
Sachet filtre
Filter bag
3. Scheda elettronica
Fiche électronique
Electronic card
4. Spazzola
Polisseuse
Brush



Amico Box è anche disponibile nella "versione d'appoggio", nella quale l'unità operativa anziché essere su ruote, è direttamente posta sul banco di lavoro ed è predisposta per l'aspirazione

L'Amico Box est aussi disponible dans une version pour plan de travail avec des aménagements à prévoir..(Moteur aspiration - prise de courants etc.....)

Amico Box is also available in a fixed version in which the operation unit is directly placed on the work top and it is predisposed for suction unit.