

ORTHO CAR

Orthocar è un carrello multifunzione, espressamente studiato per l'uso da parte dell'ortodontista.

Orthocar est un chariot multifonctionnel, spécialement conçu pour le travail de l' orthodontiste.

Orthocar is a multifunctional trolley specially designed for the orthodontist's use.

Unser Orthocar ist ein multifunktion und vielseitiger Kart übergelegt um eine Benutzung für den Kieferorthopädiendarzt.

- L'immagine è puramente illustrativa.
- L'image n'a qu'une valeur indicative.
- The picture is only illustrative.
- das Bild ist nur für verständliche Information.



Il modello base è equipaggiato con la siringa, il micromotore e la turbina.

Le modèle base est équipé avec la seringue, le micromoteur et la turbine.

The basic model is equipped with syringe, micromotor and turbine.

Das Standardmodell des Kart ist ausgerüstet mit:

Spritze, Micromotor, Turbine.



Orthocar è inoltre dotato di:

- Porta con centralina e riserva d'acqua 1L (1);
- Distributore di prodotti monouso (2);
- Gancio laterale per pedale (3).

Orthocar est aussi équipé de:

- Porte avec unite de puissance et reserve d'eau de 1L (1);
- Distributeur pour produits jetables (2);
- Crochet latéral pour pédale (3).

Orthocar is also equipped with:


- Door with power unit and one liter water supply (1);
- Dispenser for disposables products (2);
- Side hook for pedal (3).

Das Orthocar ist auch mit folgenden Elementen ausgestattet:

- Eine Tür mit integrierte Steuerung und eine 1 Liter Wasserflasche (1);
- Spender für Einweg Produkte (2);
- Ein seitliches Hacken für Fußteuer (3).

CARATTERISTICHE TECNICHE /Caractéristiques techniques /Technical features /Technische Daten

Dimensioni: /Dimensions /Size /Maße	L. 750 P. 485 H. 815 mm	
Dimensioni imballo: /Dimensions de l'emballage /Packing Size /Packungsgröße	L. 910 P. 560 H. 910 mm	
Peso: /Poids /Weight /Gewicht	kg.45	kg.55
Potenza massima assorbita: /Consommation de puissance maximale /Max power input /Maximale Stromstärkeaufnahme	100 VA	
Alimentazione pneumatica: /Alimentation d'air /Air supply /Luftzufuhr	5,5 - 7 bar	
Alimentazione AC: /Alimenter AC /Supply AC /Liefern AC	230 volts - 50Hz	

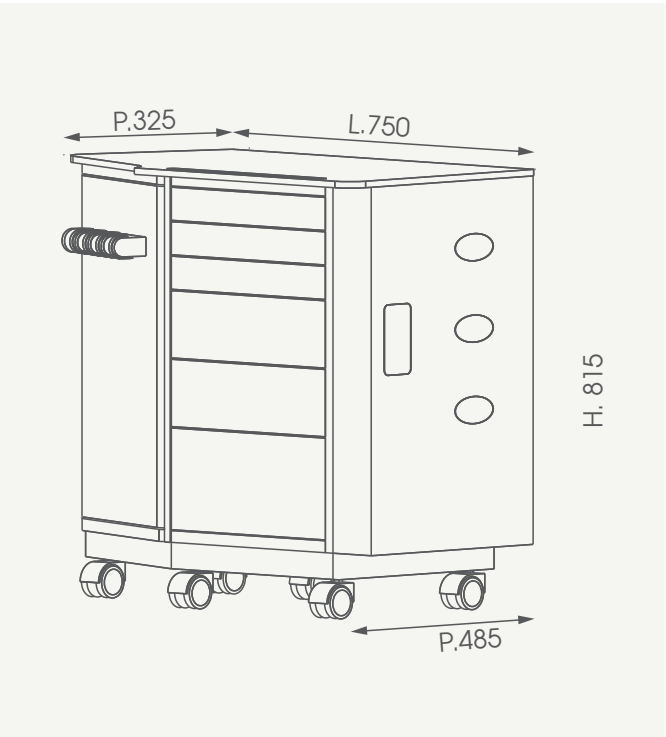

RIUNITI A CARRELLO

UNITS DENTAIRES

DENTAL UNITS

BEHANDLUNGS-EINHEITEN

AIR & ORTHO CAR

WWW.ZILFOR.COM

AIR CAR

Air Car è un carrello dal design elegante ed ergonomico ed è, inoltre, un utile supporto come unità supplementare per ogni studio dentistico.
È un carrello di grande versatilità perché può essere spostato agevolmente da un'unità operativa all'altra, fungendo da mini riunito portatile e ben adattandosi alle singole fasi di lavoro.

Il modello base elettropneumatico è equipaggiato con:

- Siringa Luzzani a 3 funzioni;
- 2 uscite ad aria con tubi Midwest (per micromotore e turbina pneumatica non forniti);
- Riserva d'acqua da 1L;
- Pedale wet/dry con chip ad aria.

Air Car est une unité dentaire mobile au design élégant et ergonomique qui peut faire fonction d'unité supplémentaire dans tout cabinet dentaire.
Extrêmement souple d'emploi, il peut être déplacé aisément d'une salle opératoire à l'autre et faire office d'une mini unité dentaire portable, parfaitement adaptée à toutes les phases de travail.
Le modèle base électropneumatique est équipé de:

- Seringue Luzzani 3 fonctions;
- 2 sorties d'air avec tuyaux Midwest (pour micromoteur et turbine pneumatique hors fourniture);
- Réserve d'eau de 1L;
- Pédale spray/non - spray avec chip air.

The Air Car is an elegant and ergonomic cart, a useful additional unit for any dentists office.
A very versatile cart that can be easily moved from one room to another, it is a portable mini dentists unit that adapts to each and every work phases.
The basic electro pneumatic model is equipped with:

- 3-function Luzzani syringe;
- 2 outlets with Midwest tubes (for micro motor and pneumatic turbine, not included);
- One liter water supply;
- Wet/dry pedal with air chip.

Air Car ist ein Cart mit einem elegant und ergonomisches Design und es ist auch ein nützliche Untersatz wie eine zusätzliche Einheit für jede Zahnarztpraxis.
Es ist ein vielseitiges Cart weil es von eine Einsatzkommando zu eine andere mühelos umgestellt sein werde.
Es kann sein wie ein klein Mini elektropneumatische Cart und es kann sich leicht über alles Phase des Arbeit umstellen.
Das Standardmodell des elektropneumatischen Cart kann ausgerüstet werden mit:

- 3 Funktion Spritze;
- 2 Instrumentenlinien Midwest für Turbine und Luftgetriebte Motor;
- eine 1 Liter Wasserflasche;
- ein Fußpedal wet/dry mit Chipower-Taste.

Air Car ha la possibilità di essere personalizzato a richiesta con i seguenti elementi:

- Micromotore ad induzione o tradizionale (1);
- Supporto per strumento supplementare (2);
- Separatore (3);
- Pedale a leva (4);
- Pedale a schiacciare (5);
- Scatola di derivazione (6).



Air Car est personnalisable sur demande du client avec les éléments suivants :

- Micromoteur Induction ou a charbon (1);
- Support pour instrument additionnel (2);
- Séparateur (3);
- Pédale à levier (4);
- Pédale à écraser (5);
- Boîtier de raccordement (6).

Air Car can be customized upon request with following elements:

- Brushless micro motor or traditional motor (1);
- Support for additional instruments (2);
- Separator (3);
- Pedal to activate by foot (4)(5);
- Branch box (6).



Air Car è disponibile anche con supporto a muro, o nella versione su guide che, come il modello a carrello, possono essere personalizzati a richiesta.

Air Car peut être aussi doté d'un support murale ou avec la version sur glissières, et, comme le modèle sur chariot, ils peuvent être personnalisés à la demande.

Air Car can also be available with wall support or in the version with sliding guides, and, like the cart model, they can be customized on request.

Air Car kann auch mit Wandhalterung und Gleis führungen gefertigt werden und auch diese Modelle können auf Wunsch des Kunde ausgerüstet werden.



CARATTERISTICHE TECNICHE /Caractéristiques techniques /Technical features /Technische Daten

Dimensioni: /Dimensions /Size /Maße	L. 500 P. 470 H. 800/950 mm	
Dimensioni imballo: /Dimensions de l'emballage /Packing Size /Packungsgröße	L. 910 P. 560 H. 700 mm	
Peso: /Poids /Weight /Gewicht	kg. 20	kg. 25
Potenza massima assorbita: /Consommation de puissance maximale /Max power input /Maximale Stromstärkeaufnahme	100 VA	
Alimentazione pneumatica: /Alimentation d'air /Air supply /Luftzufuhr	5,5 - 7 bar	
Alimentazione AC: /Alimenter AC /Supply AC /Liefern AC	230 volts - 50Hz	

